



# ME-240 補聴器別売商品のご紹介

ポッケ sel2

※ 価格はすべて消費税込です。

商品名	税込価格(10%)	部品写真
<b>イヤホンコード</b> 使っているうちに雑音や断音が出るようになったら交換してください。	1,100 円 (75cm) 1,650 円 (250cm)	
<b>イヤホン (PH120)</b> ※製品に付いているもの <b>イヤホン (PY100)</b> ※オプション	各 3,850 円	
<b>ジョイント (フィルター付)</b> イヤホンと耳せんをつなぐために必要です。	330 円	
<b>耳せん</b> ハウリング防止の為、ご自分の耳あなにピッタリのサイズをお使いください。 ※ 補聴器には中、小が付いています。	各 330 円	
<b>ネックストラップ</b> ※ 市販のストラップでもご利用いただけます。	880 円	
<b>マイナスイヤホンドライバー</b> 樹脂製のドライバーです。	220 円	
<b>ポケットループ</b> テレビ・ラジオ等を楽しむのに最適。 (補聴器の MT スイッチを T にして使用) ※ テレビ等のイヤホン端子へ接続するとテレビ等からの音声は消えます。	2,200 円	

ご注文はお電話、FAX、お葉書、メールにて承ります。

- 部品代金の他に送料を申し受けます。
- 注文品と数量、お客様のお名前、ご住所、お電話番号もお忘れなくお知らせください。
- お支払いは商品と同封の郵便振替用紙にてゆうちょ銀行よりお願いいたします。

株式会社 三和製作所  
 デイカパニー ミミー電子事業部  
 〒190-0003 東京都立川市栄町 6-16-1  
 TEL042-538-3316 FAX042-538-3317  
**補聴器サポートセンター TEL0120-331-756**  
 E-mail アドレス mimy@sanwa303.co.jp  
 営業時間 10:00~17:00 (土、日、祝休)


## お手入れ 一週間に一度はお手入れをしましょう

イヤホンから耳せんを取り外し、耳せんだけをぬるま湯の石鹸水で洗って下さい。

イヤホンはアルコールを浸した布でよく拭いて下さい。


ジョイントに耳垢が詰まってしまうたらジョイントも取り外して洗って下さい。

耳せん、ジョイントは完全に乾いてからイヤホンに取り付けて下さい。

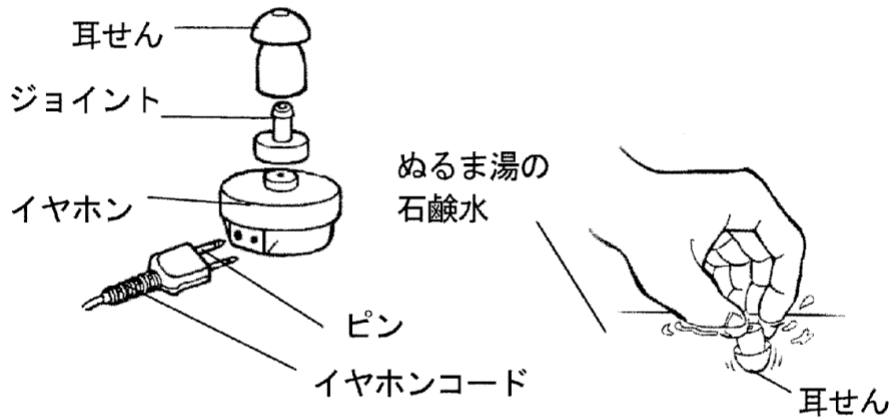

雑音を防ぐために

イヤホンからイヤホンコードを外し、反対側も補聴器のイヤホンコンセントから外し、コードの先端の銀色の2本のピンをアルコール消毒液を浸した布で目に見えない埃を良く拭いて下さい。

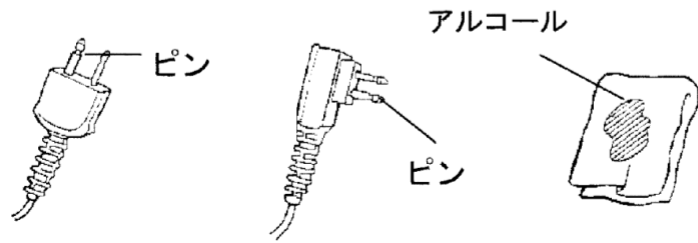

補聴器の本体はアルコールを浸した布で良く拭いて下さい。

## 故障かな?と思ったら

● 修理に出す前にお読み下さい。

症状	対策
ブーという音がしない	M.Tスイッチを“M”にする 新しい電池に交換する
ピーという音がする	耳孔に耳せんをぴったり挿入する 耳せんの大きさを変えてみる
音が小さい	耳せんの耳垢を掃除する 電池の+、-が逆になっていないか 点検する
音が出ない	新しい電池に交換してみる M.TスイッチをMにする
音がハッキリしない	ボリュームつまみで音量を上げてみる 調整つまみで音質を変えてみる 新しいイヤホンコードと交換する
雑音が出る	コードの先端のピンのお手入れをする イヤホンを交換する

これらの対策で直らない時は販売店又は下記補聴器サポートセンターへお問い合わせください。